
	Unilab - Systemadministrasjon, etikettskrivere	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D68447
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken	Versjon: 2.02/04.07.2024	
Kategori: []	Gyldig til: 04.07.2025	
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Line Agedal	

1. Etikettskrivere

Velg Systemadmin → Etikettskrivere

Her får man en oversikt over alle etikettskrivere som er lagt til i Unilab. For oversikt over dokumentsskrivere gå til Systemadmin → Skrivere ([Unilab - Systemadministrasjon, skrivere](#)). Se [Unilab - Skrivere](#) for beskrivelse av hvordan man legger til nye skrivere i Unilab.

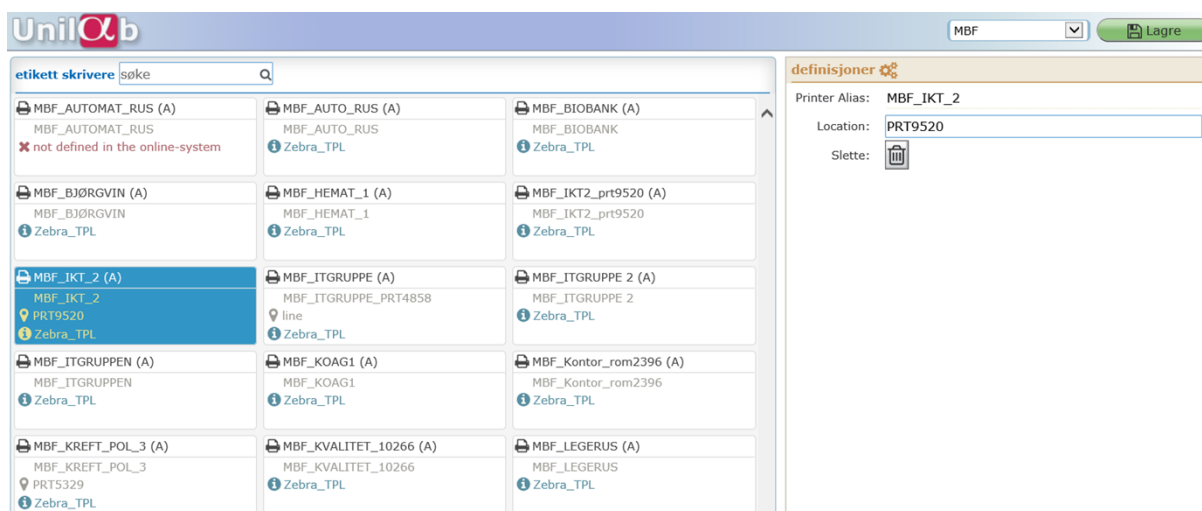

Øverst i dialogen kan man filtrere på laboratorium i en nedtrekksmeny. Default laboratorium er det laboratoriet innloggingsprofilen din er tilknyttet. Om man vil se alle etikettskrivere så må man velge alle.

Man kan også søke på navn/printer alias eller lokalisering via søkeboksen oppe til venstre i vinduet. Den søker kun på etikettskrivere koblet til det laboratoriet man har valgt i nedtrekksmenyen øverst.

Etikettskriverene listes opp alfabetisk i et dynamisk rutenett. Antall ruter per rad avhenger av skjermstørrelsen man viser dialogen på.

Følgende informasjon vises om etikettskriverne:


Navn (laboratorie ID): Viser etikettskriveren sitt navn i Unilab og laboratoriet den er tilknyttet.

Disse defineres feltene «Identification» og «Laboratory» i dialogen [Unilab - Online admin - Config master](#).

Printer alias: Navnet som vil vise i de fleste nedtrekksmenyer i Unilab. Printer alias defineres i feltet «External Id» i [Unilab - Online admin - Config master](#).

Location: Her kan man legge til plasseringen til skriveren. Denne defineres til høyre under definisjoner i denne dialogen. Når man legger til noe eller endrer noe her må man trykke lagre øverst i dialogen.

Device: Viser hvilke Unilab device etikettskriveren er tilkoblet

Dersom man ønsker å fjerne en skriver fra listen markerer man riktig etikettskriver i oversikten og klikke .

2. Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.02	Ingen endringer Forlenget gyldighet til 04.07.2025

Referanser

Interne referanser

[13.1.15.1.2.1-64](#)

[13.1.15.1.2.1-96](#)

[13.1.15.1.3-05](#)

[13.1.15.1.3-06](#)

[Unilab - Systemadministrasjon, skrivere](#)

[Unilab - Online admin - Config master](#)

[Unilab - Skrivere](#)

[Unilab - Brukerveiledning systemadministrator](#)

Eksterne referanser