
	Unilab - Fordelingsliste patologi (PAT)	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65090
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken		Versjon: 2.01/23.02.2024
Kategori: []		Gyldig til: 23.02.2025
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Cecilie Norheim	

1 Fordelingsliste patologi

Denne dialogen benyttes når man skal fordele prøver/kasus til patolog/LIS ev. til annet patologi laboratorium i Helse Vest.

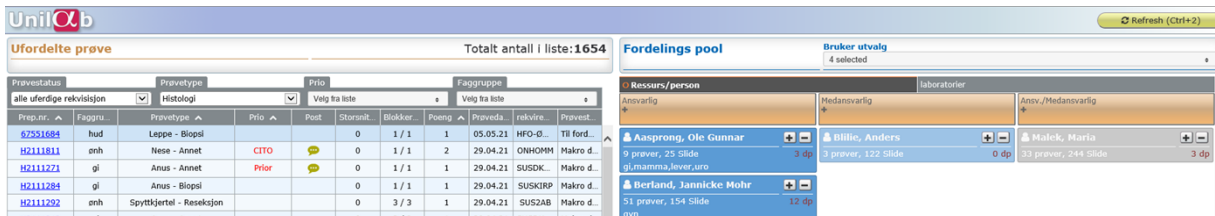

Dialogen er 2-delt:

- Venstre: Viser prøver som skal fordeles
- Høyre: Viser hvilke personer/lab man kan fordele prøver til.

Funksjonalitet i venstre del:



- **Filtering:** Prøvestatus, Prøvetype, Prioritet og Faggruppe
- **Sortering:** a-å å-a, ved å trykke på kolonneoverskrift (unntatt Prep.nr)
- Ved å trykke på Prep.nr åpnes Mikroskopi-dialogen til aktuell prøve, slik at flere detaljer og kliniske opplysninger kan leses før fordeling.
- I kolonne «Post» kan man holde musepeker over for å lese «gul lapp»

Funksjonalitet/beskrivelse av høyre del:

Fordelings pool Bruker utvalg
4 selected

Ressurs/person laboratorier

Ansvarlig	Medansvarlig	Ansv./Medansvarlig
Aasprong, Ole Gunnar + - 9 prøver, 25 Slide gi,mamma,lever,uro 3 dp	Blilie, Anders + - 3 prøver, 122 Slide 0 dp	Malek, Maria + - 33 prøver, 244 Slide 3 dp
Berland, Jannicke Mohr + - 51 prøver, 154 Slide gyn 12 dp		

- Bruker utvalg: Velg brukere/visittkort (= info. om hver enkelt bruker) fra flervalgsliste
- Blå: Signeringsnivå 8 (erfaren patolog)
- Lyseblå: Signeringsnivå 7 (mindre erfaren patolog)
- Grå: Signeringsnivå 6 (lite erfaren patolog, kun medansvarlig)

Visittkort

Aasprong, Ole Gunnar + -
 9 prøver, 25 Slide
 gi,mamma,lever,uro
 3 dp

Følgende info. finner man på visittkortet:

- Bilde (foreløpig ikke i bruk)
- Etternavn, Fornavn
- Antall prøver/rekvisisjoner
- Antall glass/slide
- Spesialisering/faggruppe/søyle
- dp=dagspoeng (tildelte poeng denne dag), + og – er manuell justering av dp
- Ved å høyreklikke på visittkort kommer man til patologens arbeidsliste, her kan man ev. høyreklikke på prøve for å få den tilbake til fordelingsliste

1.1 Fordelingsliste patologi – Hvordan fordele prøver

1.1.1. Fordeling av prøve til person

1. Velg type ansvar: Ansvarlig, Medansvarlig eller begge deler (Ansv./Medansv.)
2. Velg person
Ved kombivalg velges ansvarlig først, deretter medansvarlig.
3. Velg prøve ved å trykke på linje ev. marker flere prøver; klikk, eller shift-tast
4. Høyreklikk: Prøve(r) forsvinner fra fordelingslisten (vestre del) og ender opp på «Personlig arbeidsliste patologi»

1.1.2. Fordeling til et annet patologi laboratorium i Helse Vest

Hver pat lab har sin fargekode, som vist nedenfor.

1. Ved å klikke på fliken «Laboratorier» vises en oversikt over de andre patologi laboratoriene i Helse Vest.
2. Klikk på laboratoriet man ønsker å fordele til
3. Marker prøver man ønsker å fordele
4. Høyreklikk på markerte prøver
5. Følgende melding vil vises:

Melding fra nettside

?

Fordeling av prøve til et annet laboratorie skal bare gjøres av autorisert personell, etter avtale mellom laboratoriene. Er du sikker på at du skal fordele prøver til et annet laboratorium?

OK Avbryt

Prøven viser seg i fordelingslisten til det laboratoriet man fordelte til, slik:

Ufordelte prøve										Totalt antall i liste: 2359	Fordelings pool	
Prøvestatus	Prøvetype	Prøve	Faggruppe								Revisors/person	Laboratorium
alle uferdige rekvisisjon	Histologi	Velg fra liste	Velg fra liste									
Prep.dir.	Faggrup	Prøvetype	Prio	Post	Stors	Blokker/Sld	Poen	Prøvedato	rekvisitertid			
67584538	gyn	Cervix - Portiobiopsi, Avskrap		0	2 / 2	1	27.05.21	HFD-FSSG	Makroskopi...			
67589939	uro	Prostata - Njlebiopsi	CITO	0	4 / 12	2	31.05.21	SPURSO	Makroskopi...			
67589945	uro	Prostata - Njlebiopsi	CITO	0	4 / 12	2	01.06.21	SPURSO	Makroskopi...			
67589949	uro	Prostata - Njlebiopsi	CITO	0	2 / 6	2	31.05.21	SPURSO	Makroskopi...			
67590812	ønh	Bihale - Annet		0	2 / 2	1	25.06.21	SUSIA	Makroskopi...			
67590880	gi	Anus - Biopsi		0	2 / 2	1	29.06.21	SUSIA	Forelopig r...			
67591096	ønh	Tunge - Biopsi		0	1 / 1	1	03.08.21	SUSPAT	Forelopig r...			
67591097	ønh	Tunge - Biopsi		0	1 / 1	1	03.08.21	SUSPAT	Makroskopi...			
B9500104		Annet - Innkalt preparat		0	1 / 0	1	05.01.99	RITPAT	Makroskopi...			
B9999999	gi	Anus - Biopsi		0	10 / 10	2	14.09.17	PAT	Makroskopi...			
B1848746	annet	Annet - Annet		0	1 / 1	1	10.12.18	TEST	Makroskopi...			

Revisors/person	Laboratorium
PAT_HST Avdeling for Patologi (HST)	
Antall rekvisisjon: 4	
PAT_HFO Avdeling for patologi (HFO)	
Antall rekvisisjon: 0	
PAT_HFD Avdeling for patologi (HFD)	
Antall rekvisisjon: 2	

- Prøvenummeret er rekv. nr /unilabnummer
- Linjen har farge etter hvilket opprinnelses-laboratorium prøven kom fra
- Prøven fordeles videre til patolog (på samme måte som beskrevet tidligere)

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.01	Forlenget gyldighet til 23.02.2025

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[13.1.15.1.2.1-28](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

[Unilab - Mikroskopi \(PAT\)](#)

Eksterne referanser